

POR FAVOR, MANÉJAME CON CUIDADO

Soy la silla de ruedas de

Teléfono: +34



1.

Por favor,
trátame con
cuidado.



2.

No coloques nada
encima de mí.



3.

No me dobles y
no debería ser
desmontada.



4.

Soy esencial para
la movilidad de
mi propietario.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo:

Dimensiones:


Batería:

Certificación de transporte:


INSTRUCCIONES DE MANEJO

- 1 La silla de ruedas se apaga al mover el joystick. No desconecte ningún cable ni retire las baterías.
- 2 Puede ajustarse en modo MANUAL o en modo ELÉCTRICO (para mantener los frenos activados).
- 3 Coloque las **palancas rojas** situadas debajo del asiento, una a cada lado.

MANUAL (DESBLOQUEADO)

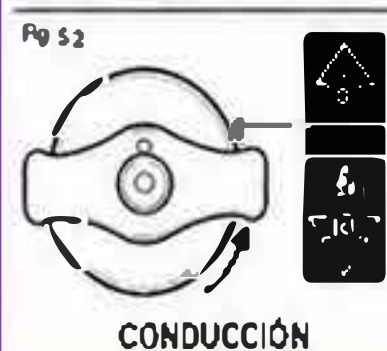

ELÉCTRICO (FRENADO)

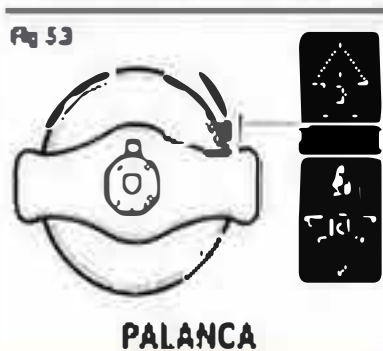

Modo MANUAL: la silla de ruedas puede empujarse.

Modo ELÉCTRICO: la silla de ruedas permanece frenada.

CERTIFICADO DE TRANSPORTE AÉREO DE BATERÍA

CERTIFICADO DE TRANSPORTE AÉREO DE BATERÍAS



SE CERTIFICA QUE LAS BATERÍAS FABRICADAS POR HAZE BAJO LA MARCA **HBIZE** SON ADECUADAS Y APROBADAS PARA TRANSPORTE AÉREO, MARÍTIMO Y TERRESTRE.

Tipo: AGM y ELECTROLITO DE GEL - Rangos

Voltaje: 2, 4, 6 y 12 Voltios

BAJO NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO DE BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO SELLADAS SIN LIBERACIÓN DE ÁCIDO.

NORMATIVA APLICABLE ACTUAL

TRANSPORTE TERRESTRE: US DOT 49CFR173.159(d) e ICAO/IATA: disposiciones especiales.

TRANSPORTE MARÍTIMO: IMDG, ONU-Nº. 2800, CLASIFICACIÓN 8
TRANSPORTE AÉREO IATA, ONU-Nº 2800 CLASIFICACIÓN 8

Firma autorizada

Gracias por cuidar de mí.